

UÑAS

ORTONIXIA **98**

ONICODISTROFIAS **100**


ONICOMICOSIS **101**

COMPLEMENTOS **101**



ORTONIXIA

COLOCACIÓN NASPAN

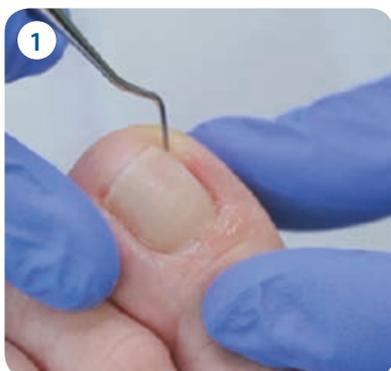

1. Preparación de la uña fresándola y limpiando los canales y ablandándola con Gehwol Nail Softener.



2. Medir la uña con la cinta métrica Naspan-Platinum.



3. Escoger la pinza el bracket Naspan-Platinum del envase según tabla:

- Soft para uñas finas a normales.
- Extra para uñas normales hasta gruesas.



4. Desinfectar el bracket Naspan-Platinum con el desinfectante LOTION GEHWOL.




5. Colocar el bracket, primero un gancho y luego el otro al lado opuesto.



6. Fijar el bracket con Gehwol Nail Repair Gel:

- Desengrasar la superficie de la uña (Gehwol Nail Repair Cleaner).
- Fijar con 3 puntos de Gehwol Nail Repair Gel.
- Eliminar la capa pegajosa (Gehwol Nail Repair Cleaner).

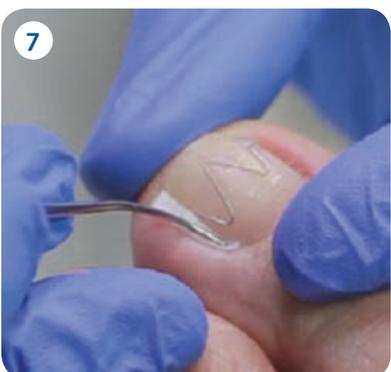

7. Proteger el canal aplicando una gota de Gehwol Fluid para desinfectar y aliviar irritaciones y colocar tamponado protector en el canal fijándolo con NAGELMASSE.

Para el éxito terapéutico cambiar el bracket después de aproximadamente 4 semanas cortando los dos brazos del bracket con un alicata corta alambres.

A continuación medir de nuevo la uña regenerada y colocar otra vez el Naspan-Platinum tensor con el nuevo tamaño apropiado.

Consulta nuestros cursos prácticos y presenciales

+

Video formativo exclusivo

www.fresco.es

NASPAN PLATINIUM®

KIT NASPAN®

Incluye:

- Caja rígida con cierre imantado, impermeable, elegante y de dimensiones reducidas. Incluye manual de uso y tabla correlacional.
- Cajita dosificadora con 25 brackets (5 brackets de la talla 1 a 5) con apertura controlada.
- Pinza.
- Cinta métrica de alta resistencia e impermeable.

NASPAN® PLATINIUM

F-02150-00 Soft (Uña delgada - Niños/mujeres)

F-02160-00 Extra (Uña gruesa - Hombres)

Recambios de 5 brackets talla 1 a 7

Medida de uña (cm)	Nº talla bracket	
1,5-1,7	1	Set de inicio Naspan
1,7-1,9	2	
1,9-2,1	3	
2,1-2,3	4	
2,3-2,5	5	
2,5-2,7	6	Tallas extra
2,8-3,0	7	Tallas extra



COMPLEMENTOS



**LOTION
GEHWOL 500 ml
F-02105-05**



**NAIL SOFTENER
15 ml
F-02106-06**



**CÓNICA
F-00187-60**



**CERÁMICA
F-00261-00**



**ONY-CLEAN
F-00114-12**



**EXCAVADOR
DOBLE AESCULAP
F-03538-00**



**NAIL REPAIR
CLEANER
F-02116-07**



**NAIL REPAIR GEL KLAR HIGH
F-02116-02**



**LÁMPARA LUZ UV PORTÁTIL
F-02130-02**



**FLUID
F-02106-05**



**TAMPONADE
F-02106-18**

ONICODISTROFIAS

NAIL REPAIR GEL

F-02116

Polímero de resina altamente consistente. Indicado para la reconstrucción en onicodistrofias. Efecto totalmente natural y con tres acabados de color (opaco, rosa y transparente) y cada uno con viscosidad alta (H) o media (M). Se recomienda utilizar la viscosidad Alta en las capas profundas y la Media para la capa superficial.

Se pueden mezclar para conseguir el color exacto del paciente.

Fácilmente moldeable.

Secado indispensable lámpara potente de Luz UV.

- F-02116-01 Klar M : Transparente Medium
- F-02116-02 Klar H : Transparente Fuerte
- F-02116-03 Rosa M : Rosa Medium
- F-02116-04 Rosa H : Rosa Fuerte
- F-02116-05 Opal M : Opaco Medium
- F-02116-06 Opal H : Opaco Fuerte



1. DESBRIDAR



RESULTADO



2. RELLENAR



MANTENIMIENTO



3. MOLDEAR



4. SECAR



5. FINALIZAR



Único Gel para onicodistrofias de ingredientes naturales.

Gel flexible, se puede cortar y limar.
Protección integral de la uña que crece debajo.

COMPLEMENTOS

LOTION GEHWOL 500 ml F-02105-05	NAIL SOFTENER 15 ml F-02106-06	CÓNICA F-00187-60	CERÁMICA F-00261-00	ONY-CLEAN F-00114-12	EXCAVADOR DOBLE AESCULAP F-03538-00	NAIL REPAIR CLEANER F-02116-07

ONICOMICOSIS

NAGELMASSE

F-02106-07

Polímero poroso para la fijación y reconstrucción en onicomicosis. Es fuertemente adhesivo, resistente y de apariencia natural. Se puede fortalecer y rellenar la uña con 2/3 capas de tamponado. Su propiedad porosa, permite penetrar el tratamiento micótico posterior con Nail & Skin Oil o Cream para facilitar el crecimiento sano y natural de la uña. Ideal también para fijar el tamponado en el canal después del tratamiento con Naspan. testado dermatológicamente.

Secado rápido.

Hipoalérgico, no irrita la piel.



TAMPONADE
F-02106-18



1. DESBRIDAR



2. LIMPIAR



3. RELLENAR



4. FORTALECER



5. RESULTADO



COMPLEMENTOS



PINCEL
MOLDEADOR
F-02116-08 nº 4
F-02116-09 nº 6

HH 106R
INSTRUMENTO
MOLDEADOR
F-03395-01



LUZ UV ULTRAPOTENTE
(Secado 2 min)
F-02130-01



PROTECTIVE NAIL
& SKIN OIL
F-02106-02 15 ml
F-02106-03 50 ml

PROTECTIVE NAIL & SKIN
CREAM 15 ml
F-02106-04

COMPLEMENTOS

PREPARACIÓN DE LA UÑA

LOTION GEHWOL 500ml
F-02105-05

Loción alcohólica con Mentol y aceite de Lavanda. Con dosificador. Limpia y refresca antes, durante y después de cualquier tratamiento. Efecto bactericida y fungicida, dejando sensación de frescor y de buen olor.



NAIL SOFTENER 15ml
F-02106-06

SUAVIZA & ABLANDA UÑAS ENCARNADAS

Ablanda la uña, disminuye las callosidades del canal y previene la formación de uñas encarnadas. Contiene Bisabolol con efecto antibacteriano. Indicado para uñas muy duras y dolorosas, pre-tratamiento de Ortonixia o pre-visita al podólogo (Ideal 3 veces a la semana antes de la visita).



FRESAS

LIMAR



CÓNICA
F-00187-60

REBAJAR



CERÁMICA
F-00261-00

LIMPIAR
EL CANAL



ONY-CLEAN
F-00114-12

DESINFECTA & ALIVIA

FLUID 15ML
F-02106-05

Propiedades desinfectantes con aceite de clavo, previene la inflamación y alivia la irritación y dolor. Indicado para post-tratamiento de ortonixia.



APLICAR

**HH 106R INSTRUMENTO
MOLDEADOR**
F-03395-01



Lleva un extremo con pala para distribuir o quitar el exceso del Nail Repair Gel o Nail Compound. El otro extremo para la limpieza del canal ungual.

PINCEL MOLDEADOR

F-02116-08 nº 4
F-02116-09 nº 6



Ideal para dar forma a la uña. Dos medidas según tamaño de la uña. Incluye pincel con 10 recambios. Lavables y reutilizables con Nail Repair Cleaner.

COMPLEMENTOS

FIJACIÓN DEL BRACKET



**NAIL REPAIR GEL
KLAR HIGH 5 ml
F-02116-02**

Polímero de resina altamente consistente. Indicado para la fijación de bracket en ortoxia y la reconstrucción en onicodistrofias. Fácilmente moldeable. Secado con Luz UV.

LIMPIAR



**NAIL REPAIR CLEANER
150 ml
F-02116-07**

Limpieza de la grasa y restos del Nail Repair Gel. Se puede utilizar para los instrumentos y pinceles utilizados para la reconstrucción ungueal o fijación del Naspan.

SECADO

**LÁMPARA LUZ UV PORTÁTIL
F-02130-02**

Equipo portátil de 9 LEDs UV. Requiere 3 pilas AAA. Solo pesa 50 gr. Exterior de acero inoxidable.



**LUZ UV ULTRAPOTENTE
F-02130-01**

Secado rápido de 2 minutos de las uñas reconstruidas con Nail Repair Gel. Con una luz UV de canal curvo.



**LUZ UV DIGITAL
F-01408-05**

Temporizador automático a la detección del pie.



PROTEGER



**TAMPONADE
F-02106-18**

Gasa de celulosa multiuso. Ideal para la protección de los canales y reconstrucción ungueal. Rollo 1,4 cm x 10 m

**PINZA PORTA AGUJAS MATHIEW
F-03050-04**

Largo: 14 cm
BH360R

Para fijar el bracket.



AESCU LAP®

SEGUIMIENTO

**SKIN OIL
F-02106-02 15 ml
F-02106-03 50 ml**



**SKIN CREAM
F-02106-04 15 ML**



TRATA & PREVIENE

A base de productos naturales como el germen de trigo, bisabolol y pantenol. Formato OIL para mejor absorción en onicomicosis. Formato CREAM para la micosis en borde periungueal, hiponiquio o pliegue lateral.

COMPLEMENTOS

**ANTI-TRANSPIRANT
CREAM 125 ml**
F-02105-03

TRATA EL SUDOR & PREVIENE MICOSIS

Tratamiento y reducción de la sudoración para uso diario y previene el mal olor y micosis. Contiene aloe vera, aceite de aguacate, glicerina, clorhidrato de aluminio y ricinoleato de zinc con sodio para prevenir la deshidratación.



**FOOT POWDER
MED 100 gr**
F-02105-04

TRATA EL OLORES & PREVIENE MICOSIS

Protección y prevención de las infecciones micóticas recurrentes. Mantiene los pies y calzado seco. Con efecto desodorizante y apto para diabéticos. Contiene almidón de tapioca óxido de zinc micronizado, bisabolol y sustancia activa de clotrimazol. Se aplica directamente en la plantilla o zapato.



ALICATE CORTA BRACKET
F-04166-00


Para corta el bracket.



EXCAVADOR DOBLE EAS
F-03538-00

Para colocar el Tamponade.

AESCLAP®

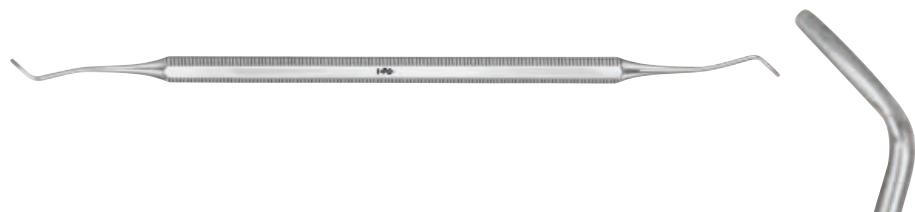

RESINAS AUTOPOLIMERIZANTES

F-01919-00 50 c.c. Monómero + 50 gr. copolímero

F-01919-01 Botella líquida

F-01919-02 Frasco de resina

Producto utilizado para construir uñas.

Endurece a temperatura ambiente; también se utiliza para la técnica de la ortonixia.

